



مدينة الملك فهد الطبية
King Fahad Medical City



تعليمات جهاز الاستشعار (السنسور) لمستخدمي مضخة الانسولين 640

Sensor Instruction for 640 Insulin Pump

تشغيل خاصية الحساس:

القائمة ← إعدادات الحساس ← on

أوقات التحليل:

بعد فترة الإحماء

التحليل الثاني: بعد ٦ ساعات

التحليل التي تليها: خلال كل ١٢ ساعة (يوميًا)

الأيقونات ومدلولاتها:

		
<p>أيقونة المعايرة: توضح الزمن المتبقي لبدء المعايرة الجديدة</p>	<p>أيقونة الاتصال: منفصل</p>	<p>أيقونة الاتصال: متصل</p>

		
<p>أسهم الاتجاه: يوضح اتجاه سكر الدم كلما زاد عدد الأسهم زادت سرعة تغير قراءة السكر</p>	<p>تظهر عند بداية عمل الحساس</p>	<p>أيقونات حياة الحساس: توضح عدد الأيام المتبقية قبل أن يحتاج الحساس إلى تغيير</p>

ملاحظة:

- 1- تختلف قراءات جلوكوز الحساس عن جلوكوز الدم
- 2- يجب عدم استخدام قيمة حساس سكر الدم لاتخاذ قرارات علاج السكر
- 3- عندما تكون قيمة حساس سكر الدم مرتفعة أو منخفضة يجب عليك استخدام جهاز قياس سكر الدم
- 4- **تجنب** المعايرة بعد الوجبات، بعد جرعات الانسولين، بعد النشاط الرياضي و عند ظهور أكثر من سهم على الشاشة
- 5- لتجنب لاستيقاظ خلال ساعات النوم تذكر القيام بالمعايرة قبل النوم
- 6- **لا** تقم بإدخال نفس قياس سكر الدم كمعايرة إذا تجاوز الوقت أكثر من 5 دقائق
- 7- استخدم دائماً نفس جهاز قياس سكر الدم للمعايرة
- 8- **تأكد** من غسل اليدين بالماء و الصابون قبل أخذ قراءة السكر للمعايرة

توصيل المضخة بجهاز البث:

1- قم بتوصيل جهاز البث بالشاحن

2- القائمة ← خيارات الجهاز ← قم بوصل الجهاز
توصيل تلقائي ← اضغط ← وأختر متابعة

3- قم بإزالة جهاز البث من الشاحن، في حالة عدم
وميض الضوء الأخضر في جهاز البث أعد توصيل
الجهاز بالشاحن حتى يتم شحنه بالكامل

4- قم باختيار بحث في المضخة

5- تأكد من الرقم التسلسلي الذي يظهر على المضخة
هو الرقم التسلسلي الموجود على الجزء الخلفي من
جهاز البث ← تأكيد

ملاحظة:



تأكد من وجود جهاز إرسال واحد في كل مرة

قد يستغرق البحث عن جهاز إرسال حتى دقيقتين

لا يلزم القيام بهذه الخطوات إلا أثناء التثبيت لأول مرة فقط ولن تضطر إلى تكرارها مع كل حساس جديد تبدأ تشغيله

شحن جهاز البث عند تركيب حساس جديد لمدة عشرين دقيقة

إذا توقفت عن استخدام نظام المراقبة المستمرة للسكك لفترة من الزمن وتحتاج إلى تخزين جهاز البث، يرجى التأكد من تركه متصلاً بالشاحن خلال فترة التخزين

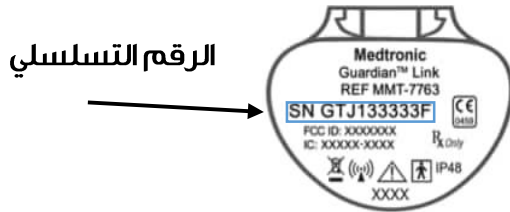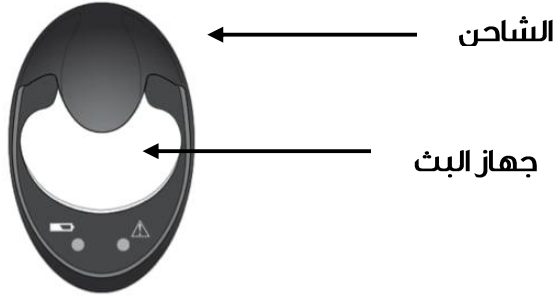

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

مركز السمنة والغدد الصم والاستقلاب



HEM1.20.0001024

