



تجمع الرياض الصحي الثاني
Riyadh Second Health Cluster



جهاز المساعدة على الكحة

Cough assist device

الغرض منه:

يساعد على تنظيف الإفرازات من الرئتين وبالتالي يساعدك على التنفس.

عندما تستنشق الهواء (الشهيق) يعطيك الجهاز هواءً (ضغط إيجابياً) للمساعدة في توسيع رئتيك. وعندما تخرج الهواء (الزفير)، يقوم الجهاز بسحب الهواء من رئتيك بقوة شافطة (ضغط سلبي).

يساعد هذا التغيير السريع في الضَّغَط أثناء المراحل المختلفة للتنفُّس (الشهيق والزفير) في جعل كحَّتكَ أقوى و أكثر تأثيراً.

طرق إعطاء جهاز المساعدة على الكحة:

- عن طريق كمامة
- عن طريق أنبوب التنفس بالفم أو الأنف
- عن طريق أنبوب فتحة الحنجرة

دواعي الاستعمالات:

- المرضى الغير قادرين على الكحة.
- المرضى الغير قادرين على تنظيف الإفرازات نتيحة الانسداد المخاطي .
- لمعالجة أو منع انكماش الرئة.
- المرضى ذوي الفتحة الحنجرية الغير قادرين على طرد الإفرازات بفاعليّة.

موانع الاستعمال:

- مريض له تاريخ في / معه انتفاخ الرئة.
- توقع وجود استرواح صدري (الصدر المثقوب).
- إذا عُرف حديثًا بوجود زيادة في الهواء الرئوي.
- إذا كان هناك اختلال في العلامات الحيوية.

حالات المرض أو الظروف التي قد تستفيد من جهاز
المساعدة على الكحة:

الأمراض المعيقة:

- التهاب الشعب الهوائية المزمن.
- التليف الكيسي.
- الالتهاب الرئوي.

أمراض التقلص:

- الأمراض العصبية العضلية.
- المرضى المصابون بنقص المناعة.

كيف أستخدم جهاز المساعدة على الكحة ؟

- وصل الأنابيب بالجهاز، للمعالجة عن طريق فتحة الحنجرة، استعمل وصلة (15 مم) و كوع مغلق.
- تأكد أن أوقات الشهيق، والزفير، ومدة التوقف مضبوطة حسب أمر الطبيب. (ملاحظة: لاتقم بتغيير هذه الأوقات إلا بطلب من الطبيب المعالج).
- يجب التأكد من نسبة الضغط في الشهيق والزفير قبل كل معالجة باتباع الآتي:
 - شغل الجهاز.
 - اختر الوضع أوتوماتيك AUTO (في الجزء العلوي الأيسر من الجهاز).
 - أغلق الأنابيب بيدك واسمح للجهاز بالتنقل من الشهيق إلى الزفير.
 - اضبط مفتاح الضغط (في الجزء السفلي وسط الجهاز) حتى تصل إلى الضغط المطلوب.

- حول الوضع إلى يدوي MANUAL .
- متى تم ضبط الضغط أصبح بإمكانك بدء العلاج عن طريق وضع الكمام على المريض أو الكوع المغلق مع فتحة الحنجرة.
- قم بتغيير الوضع إلى أوتوماتيك، وسوف يقوم الجهاز بالتنقل بين الشهيق والزفير.
- اسمح للجهاز بالتنقل لمدة إلى 5 مرات كل مرة، واتبعها بفترة استراحة لمدة 15 - 30 ثانية.
- غير الوضع إلى يدوي بعد المرة الرابعة.
- قم يدويا بإعطاء 2 نفس (شهيق) مستمرة، كل نفس واحد يستمر لمدة ثانيتين. (ملاحظة: دائما أنه المعالجة بإعطاء شهيق لكي تفتح الرئتين).
- انتظر لمدة 15-30 ثانية للاستراحة قبل البدء بالمعالجة مرة أخرى. لأن فترة الاستراحة ربما تحتاج إلى شطف البلغم للمريض.
- يتألف العلاج الكامل من 5 معالجات كاملة.

كيف أنظف معدّاتي؟


يجب أن ينظف مبيسم الفم بعد كل علاج.

- اغسل يديك .
- افتح ماء الصنبور الساخن لمدة دقيقتين.
- انزع مبيسم الفم واغسله في طبق صابون وطبق ماء في وعائين منفصلين .
- اشطفه بماء الصنبور الساخن .
- جففه في الهواء باستعمال فوطة نظيفة حتى علاجك القادم .

لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

إدارة الرعاية الصحية المنزلية

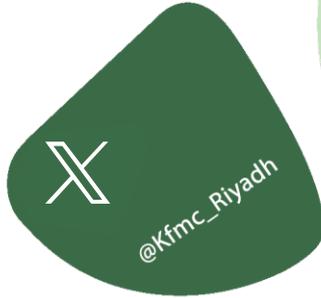

HEM6.16.000113

