




مدينة الملك فهد الطبية  
King Fahad Medical City

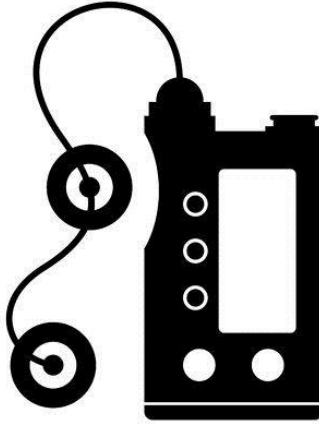

## تعليمات جهاز الاستشعار (السنسور) لمستخدمي مضخة الانسولين

### Sensor Instruction for Insulin Pump Patient

## طريقة إدخال التحاليل عن تركيب جهاز الاستشعار (السنسور):

ملاحظة: احتمال عدم ظهور ( Enter Meter BG ) (أدخل ق.س) إلا بعد تركيب جهاز الاستشعار بساعتين.


Sensor → Enter Meter BG


جهاز الاستشعار ← أدخل ق.س.

## أوقات التحاليل:

- التحليل الأول: بعد التركيب بساعتين.
- التحاليل التي تليها: كل ١٢ ساعة (يوميًا).

## طريقة ربط جهاز الاستشعار بالمضخة عند الانقطاع:

جهاز الاستشعار متصل 

جهاز الاستشعار غير متصل 

Sensor → Link to Sensor → Find  
Lost Sensor

Or

Sensor → Link to Sensor → Reconnect  
Old Sensor


جهاز الاستشعار ← ربط جهاز  
الاستشعار ← جد جهاز الاستشعار الضائع

أو

جهاز الاستشعار ← ربط جهاز الاستشعار  
أعد توصيل ج.ا. القديم ←

## ملاحظة:

في حال ظهور رسالة على الشاشة بانتهاء جهاز الاستشعار قبل انتهاء ٧ أيام من التركيب، قم بالآتي:

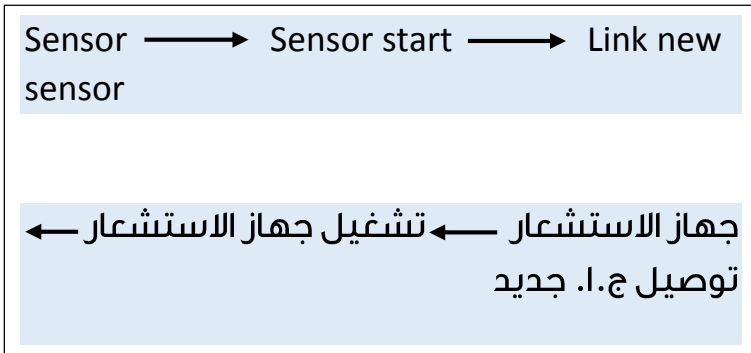

# لأن الوعي وقاية ..

إدارة التثقيف الصحي

شعبة التثقيف الصحي بمركز السكر



HEM3.16.000285

